

この取扱説明書をよく読んでご使用ください。取扱説明書は大切に保管して下さい。
本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。水溶液を撈拌子で撈拌するための装置です。水溶液の種類、量によって撈拌の状態が変わります。撈拌を回転調整つまみで調整して使用します。強力なサマリウムコバルト磁石を使用しております。回転数はデジタル表示されます。

仕 様

撈拌容量	100mL～3L（水、ビーカーで付属の回転子使用の場合）
回転数	デジタル表示 約 100～約 1500rpm （水、1 L ビーカーで付属の回転子使用の場合）
撈拌台寸法	170×160mm
モーター	D C モーター 電圧制御
電源	AC100V、50/60Hz、0.2A
使用環境	温度 5～35℃ 湿度 80%以内
外寸法・重量	W176×D170×H57mm・1kg
付属品	30mm 撈拌子×1 アースコード×1
オプション	スタンド棒 SP-200（ℓ200mm×2）ねじ込式 φ10×ℓ400mm×1


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源は AC100V、0.5A 以上取れるコンセントに直接差し込んでください。
- 必ずアースを **G** アース接続端子に接続してください。
- 電源コードを束ねたまま、使用しないでください。過熱、火災の原因となります。
- 強磁力（サマリウムコバルト）に注意して下さい。時計、計測器等は近くにおかないでください。
- 水平に設置し、側面、背面は 15cm 以上の間隔を空けてください。
- 回転を上げるときは徐々に上げてください。急激に回転をあげると撈拌子が飛び容器が破損することがあります。
- 本器に水溶液がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。感電、漏電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. 電源スイッチ付回転調整つまみの **OFF** を確認し、電源コードを差込みます。
付属のアースコードもあわせて接続します。
2. 試料容器の中に付属の攪拌子を静かにいれ、攪拌台の中央に置きます。
3. つまみを **ON** の位置にあわせると電源ランプが点灯します。
4. さらに時計方向に回して必要な回転に調整します。回転数はデジタル表示されます。
5. 使用後、必ず電源の **OFF** を確認してください。
6. スピードの微調整を行いたい場合は、背面の **SPEED ADJUST** を（－）ドライバーで注意深く回して行います。
7. 付属以外の回転子を使用した場合、攪拌ができない場合があります。

機能説明図

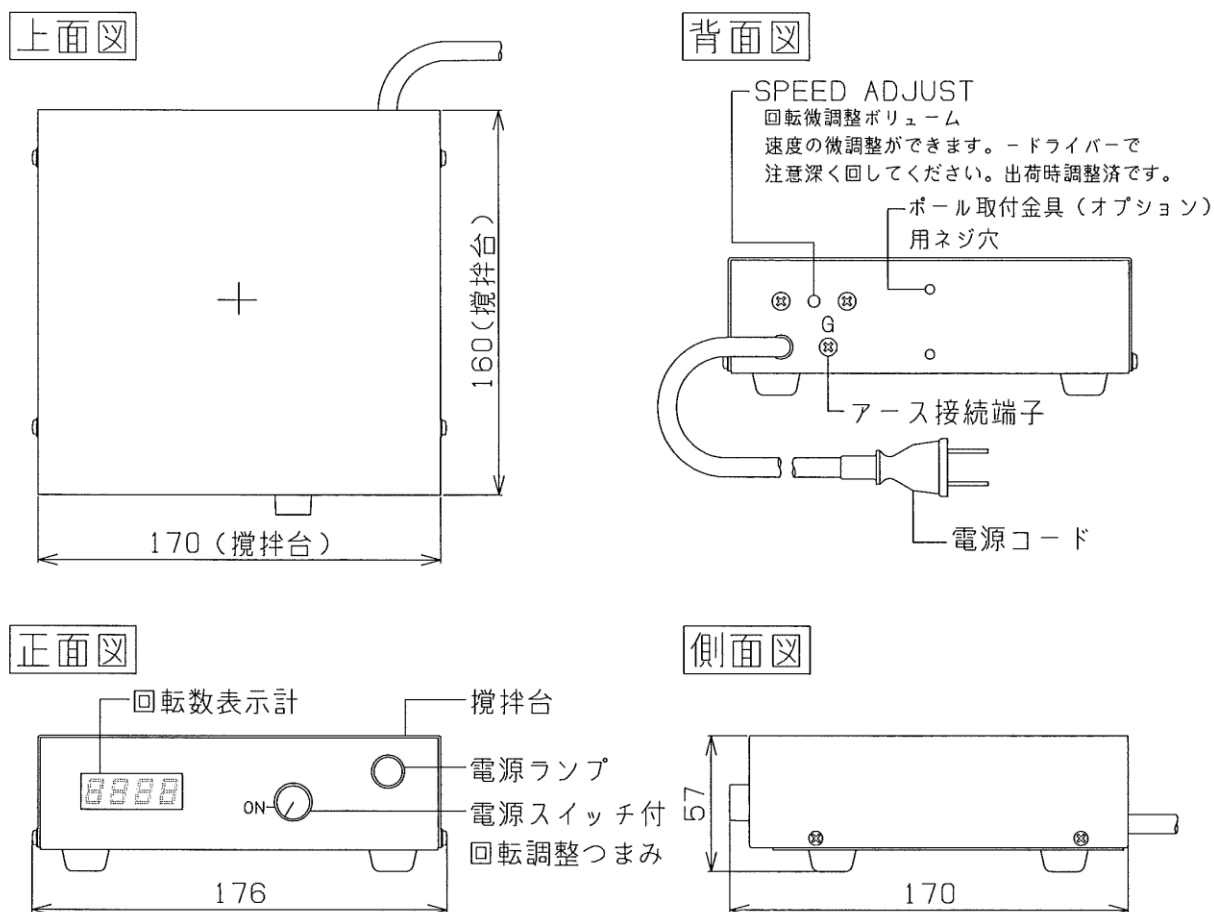

保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
DCモーターを使用しておりますので、使用頻度によって寿命が異なります。モーター消耗の場合は1年以内であっても交換料をいただきます。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。
製造番号もあわせてご連絡ください。