

クールインキュベータ CN-40A

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



温度制御範囲 3℃～45℃

ペルチェ素子を使うことにより、1℃刻みに温度設定が可能。研究・産業試験用途に適した製品です。

安定した庫内温度環境

アルミ5面自然対流方式により、庫内の温度勾配が小さくなっております。

低振動設計

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。

コンパクトで高収納設計

コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。シャーレ(φ90x15mm)を140枚以上収納することができます。


観察用透明内扉

扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)

鍵・接続孔 標準装備

扉には鍵が掛けられ、貴重な試料の保管にもお使いいただけます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せる接続孔が付いています。

操作パネル

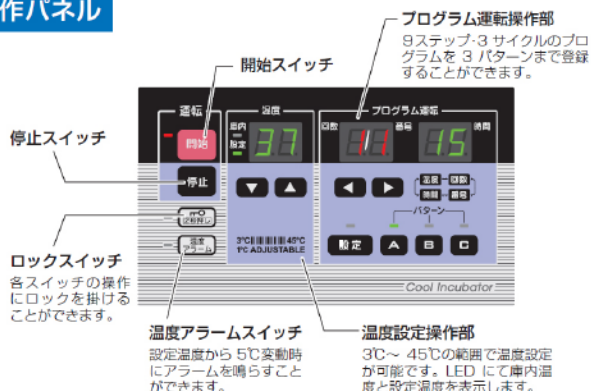

CN-40A

自然対流方式(5面冷却・加温)
ペルチェ素子モジュール
3～45℃まで1℃単位 (周囲温度0～30℃)
過昇温度保護機能
360×276×420mm ※1
450×455×550mm
アルミ(エポキシ焼付塗装)
鋼板・ABS樹脂
41L ※1
AC100V 50/60Hz
98W
18kg
棚網2枚、鍵2ヶ 簡易取扱説明シート1枚

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-01	CN-40A	219,500	175,600

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>