

Fine 多連式スターラー

DCモーター

日本製

それぞれのツマミで独立制御

【攪拌容量:50ml~2ℓ(1箇所当り)】

EGE


商品コード	型式	種類	攪拌容量	価格(¥)
692-63-08-03	F-624N	4連	50ml~2ℓ(1箇所当り)	76,000
-04	F-626N	6連	50ml~2ℓ(1箇所当り)	99,800

仕様

型 式	F-624N	F-626N
回 転 数	100~1500rpm	
モーター・制御	DC小型・電圧制御	
外 形 寸 法	306×335×57Hmm	456×335×57Hmm
重 量	3.8kg	5kg
電 源	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 2A
付属攪拌子	30mm×4個	30mm×6個

■特長

- DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
- 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
- 冷蔵庫、低温室での使用、1ℓぐらいまでの攪拌容量での安定回転の追求に適しています。
- 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

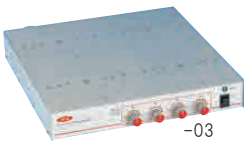

-03



-04

Fine デジタル表示付き多連式スターラー

DCモーター

日本製

1番の回転数がデジタル表示

【攪拌容量:50ml~2ℓ(1箇所当り)】

EGE

商品コード	型式	種類	攪拌容量	価格(¥)
692-63-08-15	F-624ND	4連	50ml~2ℓ(1箇所当り)	99,800
-16	F-626ND	6連	50ml~2ℓ(1箇所当り)	126,000

仕様


型 番	F-624ND	F-626ND
回 転 数	100~1500rpm	
モーター・制御	DC小型・電圧制御	
外 形 寸 法	306×335×57Hmm	456×335×57Hmm
重 量	3.8kg	5.1kg
電 源	AC100V 50/60Hz 1A	
付属攪拌子	30mm×4個	30mm×6個

■特長

- DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
- 1番の回転数だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
- 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
- 冷蔵庫、低温室での使用、1ℓぐらいまでの攪拌容量での安定回転の追求に適しています。
- 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。



-15

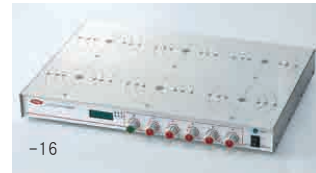

-16

Fine 多連式ミニスターラー

12個連動型

DCモーター

日本製

EGE


商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-08-53	F-612	5~100ml×12 200~300ml×6 500ml~1ℓ×2	100~1500	116,000

■特長

- 省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して攪拌できます。
- 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の攪拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。攪拌台の発熱はありません。
- 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

仕様

- 外形寸法:302×235×55Hmm
- 重量:3.8kg
- 電源:AC100V 50/60Hz 2A
- 付属攪拌子:20mm12個

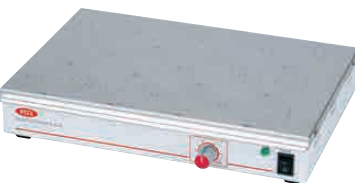

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03(3252)3461 FAX 03(3252)5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939 FAX 06(4800)3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ 電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階 電話 050(6868)2001 FAX 0120(823)445

汎用機器 Fine スターラー 特集

スターラーには、モーターの力、回転速度、磁石の種類と大きさ、間隔、容器との距離、攪拌したい量、設置できる面積、発熱、使用する容器、など、いろいろな要素があり、多種多様なタイプのスターラーを取り揃えておりますので、用途に応じた Fine スターラーをお選びください。



Fine スターラー



Fine スターラー



Fine スターラー



Fine スターラー



Fine デジタル表示 スターラー



Fine 薄型スターラー



Fine マグネチックスターラー



Fine 強磁カスターラー



Fine 強磁カスターラー



Fine ウォーターバス用スターラー



Fine 反転スターラー



Fine 多連式スターラー



Fine デジタル表示付き多連式スターラー



Fine 多連式ミニスターラー

Fine スターラー DCモーター

小型・安定回転
【攪拌容量: 50ml~1ℓ】

■特長
●電子制御方式のDCモーターを使用。
●安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。
●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

EGE

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-10-01	FS-05	50ml~1ℓ	100~1700	18,000

■仕様
●プレート寸法: 80×135mm
●外形寸法: 83×151×64Hmm
●重量: 900g
●電源: AC100V 50/60Hz 0.2A
●付属攪拌子: 20mm 1個

Fine スターラー くまとり形モーター

【攪拌容量: 50ml~3ℓ】

■特長
●ダイヤルツマミで回転数が設定できます。
●電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。
●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

EGE

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-08	F-101N	50ml~3ℓ	400~1500	19,000

■仕様
●モーター: くまとり形
●プレート材質: ステンレス
●外形寸法: 183×195×83Hmm
●重量: 1.35kg
●電源: AC100V 50/60Hz 0.5A
●付属攪拌子: 30mm 1個

Fine スターラー DCモーター

小型で軽量。理化学実験の試料攪拌に最適
【攪拌容量: 50ml~3ℓ】

ボールセット

-10: EGE -29: EHV

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-10	F-301N	50ml~3ℓ	100~1800	24,500
-29	SP200	スターラー用ボールセット		8,000

■特長 ●DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 ●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
■仕様
●モーター: DC形 ●プレート材質: ステンレス
●外形寸法: 176×170×57Hmm ●重量: 約1kg
●電源: AC100V 50/60Hz 0.2A ●付属攪拌子: 30mm 1個

Fine スターラー 中型用 ACコンデンサーモーター

最高5ℓまでの攪拌可能
【攪拌容量: 50ml~5ℓ】

ボールセット

-06: EGE -29: EHV

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-06	F-201N	50ml~5ℓ	70~1400	49,000
-29	SP200	スターラー用ボールセット		8,000

■特長 ●ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命・強力パワー型です。 ●攪拌容量も5ℓまで可能になりました。 ●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
■仕様 ●プレート寸法: 190×180mm ●外形寸法: 196×200×86Hmm
●重量: 2.1kg ●電源: AC100V 50/60Hz 1A ●付属攪拌子: 30mm 1個

Fine デジタル表示 スターラー DCモーター

【攪拌容量: 50ml~3ℓ】

EHJ

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-08-10	F-D301N	100ml~3ℓ	100~1500	31,500

■特長 ●DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 ●付属の攪拌子で、最適な攪拌が生まれます。
■仕様 ●モーター: DC形 ●プレート材質: ステンレス
●外形寸法: 173×170×57Hmm ●重量: 約1kg
●電源: AC100V 50/60Hz 0.2A ●付属攪拌子: 30mm 1個
●デジタル表示

Fine 薄型スターラー DCモーター

超薄型安定型
【攪拌容量: 20ml~3ℓ】

EGE

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-14	FS-01N	20ml~3ℓ	80~1500	32,000

■特長 ●薄型37mmの安定型です。電子制御回路を組み込み低速から高速までほぼ安定した回転が得られます。 ●強磁力マグネットとDC薄型モーターの採用で攪拌力がアップしました。 ●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
■仕様 ●プレート寸法: 165×145mm ●外形寸法: 170×160×37Hmm
●重量: 1kg ●電源: AC100V 50/60Hz 0.2A ●付属攪拌子: 30mm 1個

Fine マグネチックスターラー 出力コンセント付

バス等の使用も可能
【攪拌容量: 50ml~5ℓ】

DCブラシモーター

※水、ビーカーで付属の回転子を使用の場合

※オイルバス等の加熱器具と組合せてご使用になる場合には、別売のアルミガラスクロスをご購入ください。

ボールセット

-15: EHV -16: EHV

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	タイプ	価格(¥)
692-63-07-15	F-601	50ml~5ℓ	約100~約1700*	アナログ	38,000
-16	F-601D			デジタル	44,500
-28	SP400	スターラー用ボールセット			8,000
-30	AGC190	アルミガラスクロス 2枚			8,000

■特長 ●フリー電源: AC85V~240V
●出力コンセント付き。背面の外部出力(AC 0.25V 5Aまで使用可)でバス類の電源を確保
●安定した強力攪拌 ●選べる攪拌子(付属は40mm)
●安全: ボールセットを取付けてオイルバス等の容器を固定
■仕様
●モーター: DCブラシ長寿命型・電圧制御
●攪拌台寸法/材質: 180×180mm/SUS304
●マグネット: ネオジム ●使用可能攪拌子: 10~60mm(セル用)
●外形寸法: 183×206×84Hmm ●重量: 1.9kg
●電源: AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
●使用環境: 温度4~37℃、湿度85%以内 ●付属品: 攪拌子(40mm)

Fine 強磁力 スターラー インダクションモーター

フィードバック回転制御方式
【攪拌容量: 5ml~3ℓ】

ボールセット

EGE

商品コード	型式	攪拌容量(ℓ)	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-31	F-R600	0.05~3	約50~1400	88,000

■仕様
●モーター: インダクションフィードバック制御
●プレート寸法: 128φmm ●外形寸法: 154×181(230)×123Hmm
●重量: 2.6kg
●電源: AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
●付属攪拌子: 4A攪拌子 1個、スタンド棒1個

Fine 強磁力 スターラー DCブラシレスモーター

ハイパワーな高性能デジタル表示
【攪拌容量: 100ml~20ℓ】

ボールセット

-24: EGE -28: EHV

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-24	F-205D	100ml~20ℓ	80~1500	98,400
-28	SP400	スターラー用ボールセット		8,000

■特長 ●強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の攪拌機構で背の低い高粘度攪拌を実現しました。
●デジタル表示で攪拌速度の再現性がもてます。
●付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
■仕様
●モーター: DCブラシレスモーター ●プレート寸法: 270×270mm
●外形寸法: 277×286×80Hmm ●重量: 3.8kg
●電源: AC100V 50/60Hz 0.12A(外部出力コンセント7A付き)
●付属攪拌子: 40mm 1個

Fine ウォーターバス用スターラー くまとり形モーター

バスの攪拌 出力コンセント付
【攪拌容量: 100ml~10ℓ】

ボールセット

-28: EHV -41: EGE

商品コード	型式	攪拌容量(ℓ)	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-07-41	FWBS-2	0.1~10	300~1500	38,500
-28	SP400	スターラー用ボールセット		8,000

■特長 ●長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌に、背面に出力コンセントが付属しています。 ●断熱台付きで、スターラーの本体に熱が伝わりにくくなっています。 ●攪拌子が50mm と長め、大きな渦ができるゆったり攪拌です。
■仕様
●モーター: くまとり形 ●制御: 電圧制御、電磁ブレーキ併用
●材質: SUS304、断熱台付き ●外部出力: AC100V 7A
●外形寸法: 255×285×104Hmm ●重量: 3.9kg
●電源: AC100V 50/60Hz 1A

Fine 反転スターラー DCブラシレスモーター

反転攪拌で効率アップ
【攪拌容量: 100ml~10ℓ】

ボールセット

(A) 本体 EGE

商品コード	型式	攪拌容量	回転数(rpm)	価格(¥)
692-63-08-08	FR-203N	100ml~10ℓ	80~1800	84,500

(B) オプション EHV

商品コード	型式	品名	価格(¥)
692-63-07-28	SP400	スターラー用ボールセット	8,000

■特長 ●右回転・左回転・反転攪拌と多機能です。 ●回転速度が目盛表示されています。 ●反転時間が120秒まで選べます。
■仕様
●モーター: DCブラシレスモーター ●プレート寸法: 270×250mm
●反転時間: 10~120秒調節可 ●外形寸法: 278×286×81Hmm
●重量: 3.6kg ●電源: AC100V 50/60Hz 1A
●付属品: 攪拌子30mm、40mm 各1個
●オプション: ボールセットSP-400(L200×2) ねじ込み式10φ×400mm