

新製品

Fine 組立式カート

FCD-450/FCD-600

商
品
紹
介



特長

- 簡易実験台、作業台、搬送用としてご使用できます
- 天板・棚板はメラミン化粧板で耐傷、耐薬品性に優れています
- 天板に軟質ソフトエッジを施しています
- キャスターはゴム製φ75単輪自在式で楽に移動ができ、4輪全てストッパー付で安全にロックを掛けることができます

材料比較

化粧材料比較	耐水性 耐久性	耐光性 変色	硬度 (耐摩耗性)	耐汚染性 (清掃性)	強度 剛性
塩ビシート	◎	◎	○	○	△
ポリエステル化粧板	△	△	○	○	△
ウレタン塗装板	○	△	○	○	△
メラミン化粧板	◎	◎	◎	◎	◎

※一般的な諸物性比較で保証値ではございません

仕様

天板	メラミン化粧板(白色)
棚板	メラミン化粧板(白色)
支柱	スチール角パイプ31mm (シルバーメタリック粉体塗装)
キャスター	ゴムキャスター φ75単輪自在、4輪ストッパー付
耐荷重	均等荷重 天板:約80kg/棚板:約10kg
重量	FCD-450:約16.5kg/FCD-600:約18.5kg

Fine組立式カート

商品コード	型式	外径寸法(W×D×Hmm)	価格(¥)
220-57-03-01	FCD-450	900×450×800	40,300
220-57-03-02	FCD-600	900×600×800	44,700

シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行なえる
小型回転振盪機です。

MRM-1000 型



50mL+15mL 遠沈管ラック

振盪方式：往復
回転数：80rpm、傾斜角度：90°



プレートラック + 細胞培養フラスコ

振盪方式：往復
回転数：3rpm、傾斜角度：10°



50mL 遠沈管 + 1.5/2.0mL チューブラック

振盪方式：往復+振動
回転数：30rpm、傾斜角度：60°、振動：強（3段階）

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。


フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本 社 〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16
電話 03(3252)3461
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06(4800)3939
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052(238)6075
福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092(643)8645
仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ
電話 022(772)7669
札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050(6868)2001


3種類の振盪方式

回転、往復、往復+振動の3種類の振盪方式でさまざまな容器を振盪させることができます。

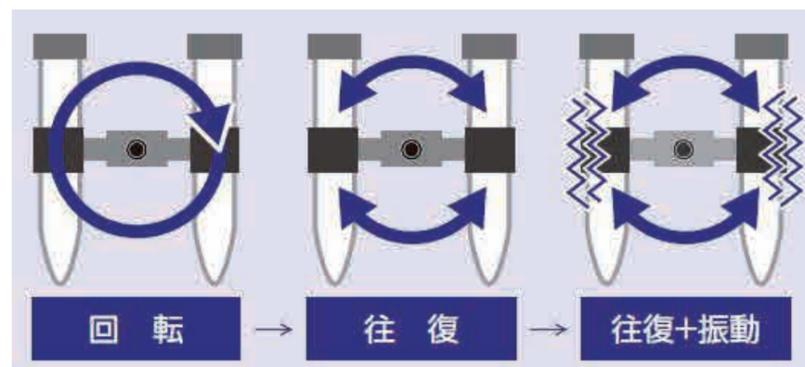

振盪方法は、ボタン1つで簡単に切替えます。

回転：一方向の回転動作。
 往復：指定の傾斜角度での往復動作。
 往復+振動：指定の傾斜角度で往復しながら頂点で振動動作を加え、壁面に付いた試料を溶かします。

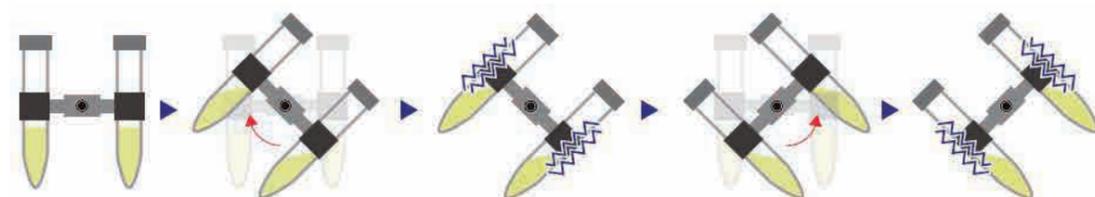

4種類のラック

使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付ける事が可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます。(プレートラックは1個のみ)



1.5/2.0mL チューブラック装着時



15mL 遠沈管ラック装着時



50mL 遠沈管ラック装着時



プレートラック装着時

仕様

(A) 本体

商品コード	型式	振盪方式	回転速度範囲	価格(¥)
594-63-45-21	MRM-1000	回転、往復、往復+振動	1~100rpm	125,000

傾斜角度	0~359° (1° 刻み)
設定・表示	シートキー入力、ダイヤル式・デジタル表示
安全機能	モーター過負荷保護回路、ヒューズ
付属機能	オートストップ、9ステッププログラム
モータ	ステッピングモータ
ラック	4種 (別売り)
許容荷重	約750g (ラック含む)
適用容器	①1.5/2.0mL チューブ ②15mL 遠沈管 ③50mL 遠沈管 ④プレートラック 180W×100D mmプレートに固定可能な平底容器、T-75 細胞培養用フラスコ
使用周囲温度	4~50℃
使用周囲湿度	30~80%RH
外寸法	333(340)W×160D×157Hmm
質量	約3.2 kg
電源入力	0.2A 20VA
定格電源	AC 100V 50/60Hz

※性能は室温 20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
 ※ラック、容器は付属していません。ラックはオプションよりお選びください。

(B) オプション

1.5/2.0mL チューブラック	15mL 遠沈管ラック	50mL 遠沈管ラック	プレートラック
MRM-R1.5	MRM-R15	MRM-R50	MRM-RP
プレートラック以外のラックと最大2個の組合せが可能です			プレートラックは1枚掛けのみで、他のラックとは組合せできません。

商品コード	型式	使用可能容器	容器掛数	取付け可能ラック数	価格(¥)
594-63-45-22	MRM-R1.5	1.5/2.0mL チューブ	12本	最大2個	12,000
594-63-45-23	MRM-R15	15mL 遠沈管	6本	最大2個	12,000
594-63-45-24	MRM-R50	50mL 遠沈管	4本	最大2個	12,000
594-63-45-25	MRM-RP	平底容器、T-75 細胞培養用フラスコ等	180W×100D mm以内に確実に固定できる数まで	1個	12,000