

仕様

	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○	別売
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2g				220g				120g	
最小表示	1μg		1μg(0～2.1g) 0.01mg(2.1～6.2g)		0.01mg		0.01mg(0～51g) 0.1mg(51～220g)		0.01mg(0～51g) 0.1mg(51～120g)	
繰り返し性 標準偏差(測定点)	0.001mg(1g) 0.003mg(6g)		0.0025mg(1g) 0.01mg(6g)		0.015mg(50g) 0.03mg(200g)		0.025mg(50g) 0.1mg(200g)		0.03mg(50g) 0.1mg(100g)	
最小計量値(参考値)	1.8mg		4mg		20mg		32mg		50mg	
直線性	±0.010mg		±0.010mg ±0.02mg		±0.15mg		±0.20mg			
計量モード	g・mg(グラム) / pcs(個数) / % (パーセント) / ct(カラット(宝石用)) / mom(もんめ(真珠用))									

(A)本体

商品コード	品名	価格(¥)
123-65-82-61	電子天びん BA-6TE	1,300,000
123-65-82-62	電子天びん BA-6E	1,100,000
123-65-82-63	電子天びん BA-6DTE	1,200,000
123-65-82-64	電子天びん BA-6DE	1,000,000
123-65-82-65	電子天びん BA-225TE	700,000
123-65-82-66	電子天びん BA-225	500,000
123-65-82-67	電子天びん BA-225DTE	600,000
123-65-82-68	電子天びん BA-225D	400,000
123-65-82-69	電子天びん BA-125DTE	500,000
123-65-82-70	電子天びん BA-125D	350,000

(B)別売品

商品コード	品名	価格(¥)
123-65-82-71	ミニプリンター AD-8126	48,000
123-65-82-72	環境ロガ AD-1687	40,000
123-65-82-73	ブルートゥースコンバータ AD-8529PC-W	26,000
123-65-82-74	ブルートゥースコンバータ AD-8529PR-W	26,000
123-65-82-75	フットスイッチ AX-SW137-PRINT プラグ付	10,000
123-65-82-76	フットスイッチ AX-SW137-REZERO プラグ付	10,000
123-65-82-77	無風イオナイザー AX-ION-25	75,000
123-65-82-78	外部IRスイッチ AX-IR-SWITCH イオナイザ用	15,000
123-65-82-79	放電電極ユニット AX-BM-NEEDLESET 4組入	5,000
123-65-82-80	ACアダプター AX-TB285	4,000

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp


本 社 〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16
電話 03(3252)3461
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06(4800)3939
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052(238)6075
福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092(643)8645
仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ
電話 022(772)7669
札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050(6868)2001

新製品のご紹介

A&D Borealis

最小表示 1μg ~ / オートドア装備

電子天びん BA-T/BAシリーズ

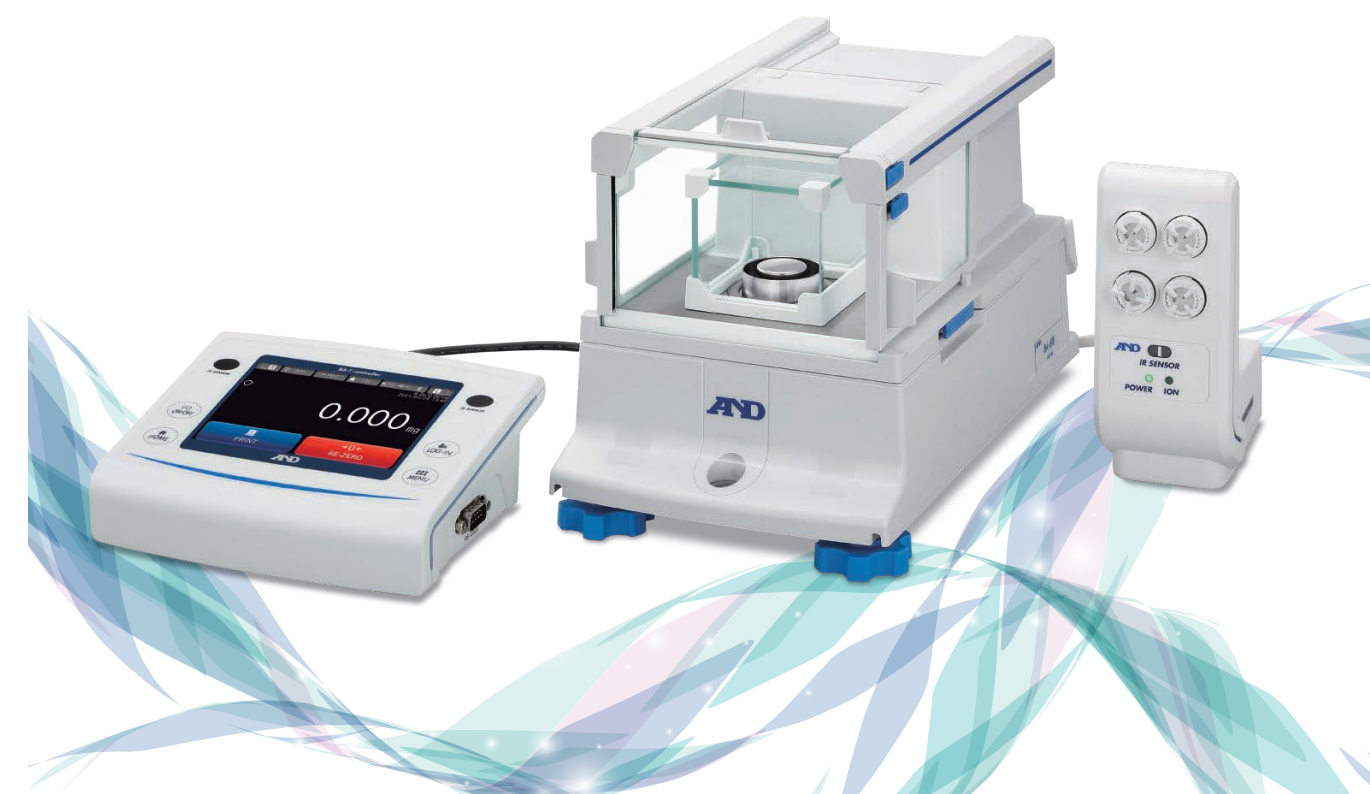

BA-T : カラー液晶表示(タッチパネル)

BA : モノクロ液晶表示

全モデル : オートドア装備

BA-TE(BA-E) : 無風イオナイザー装備

1μg 4モデル
0.01mg 6モデル
全10モデル

BA-Tシリーズ: タッチパネル付きカラー液晶表示
BAシリーズ: モノクロ液晶表示
BA-TEモデル、BA-Eモデル: 無風イオナイザー標準付属
1μg: 4モデル、0.01mg: 6モデルの全10モデル



BA-6TE

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備

元素分析・質量分析などの前処理に。1 μ g への高精度計量

- ・ BA-T シリーズ：タッチパネル付きカラー液晶表示
- ・ BA シリーズ：モノクロ液晶表示
- ・ セパレート型構造
計量部小型でドラフトの影響を受けにくく、スペースを節約できます
- ・ 全モデル オートドア装備
手を触れないで風防ドアの開閉が可能なので作業効率が大幅に向上



BA-6E

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- モノクロ液晶表示 / 無風イオナイザー装備

BA-225TE

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備

BA-225

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- モノクロ液晶表示

タッチパネル (BA-T)




IR センサ (赤外線センサ)：

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー：ログイン画面に切替

メニューキー：感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

オートドア (全モデル) 手を触れないで風防ドアの開閉が可能なので作業効率が大幅に向上

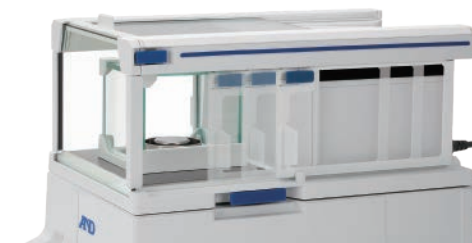

- ・ オートドア開閉幅の設定が可能
- ・ 最適な開閉幅により、外乱要因 (風や温度変化) の影響を最小限に抑え、高精度な計算を実現します。
- ・ パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です
- ・ オートドアにより、定型作業の効率が大幅にアップ
- ・ 手を触れないで風防ドアの開閉が可能
- ・ 風防のサイドドアは、表示部の IR センサー (赤外線センサ) またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます

無風イオナイザー (BA-TE/BA-E に標準装備)



- ・ 4 つの電極で強力除電可能
- ・ 風の出ない直流式で、ひょう量室内に対流を発生させないため、粉体などの除電に最適
- ・ 長寿命の電極：約 10,000 時間 (5 時間稼働 / 日で約 5.5 年)

便利な機能

■パスワード機能

天びんの内部設定、時計の設定を制限するセキュリティ機能

- ・ BA-T シリーズ：管理者 / 作業責任者 / 上級作業員 / 作業員の 4 段階
- ・ BA シリーズ：管理者 / 使用者 / ゲストの 3 段階

■自動感度調整

■USB ファンクション機能

- ・ 内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能です
- ・ 一方向 (クイック USB)：ドライバのインストールも不要で、PC に直接出力 従来のクイック USB を機能アップ。アルファベットも出力可能なので、GLP 出力や統計演算出力にも対応しています
- ・ 双方向通信 (コマンド入力)：データ処理ソフト WinCT でのデータ取得が可能です (ドライバのインストールが必要です)

■ネット/グロス/テア出力

- ・ ゼロ設定と風袋引きを別々に行う事ができ、ネット (正味量)、グロス (総量)、テア (風袋量) のデータ出力が可能です