

年賀状廃止のお知らせ

東京硝子器械株式会社
代表取締役社長 白井 一夫

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では近年のデジタル環境への移行、自然環境意識の高まりを鑑み SDGs への取り組みとして、このたび全てのお取引先様に対し、年賀状によるご挨拶を控えさせていただきますこととなりました。
つきましては弊社への年賀状によるお心遣いもご無用にてお願いいたしたく存じます。
何卒ご理解いただき今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

紙媒体 TGK NEWS 廃止のお知らせ

昭和47年(1972年)から長年にわたり TGK NEWS を毎月発刊してまいりましたが、「脱炭素社会への貢献」の取り組みの一環として、2025年1月より紙媒体での TGK NEWS の発刊を廃止させていただく運びになりました。
今後は、TGK MAIL を「TGK NEWS」へと改名させていただき、新規取扱商品や既存商品のご紹介、取扱商品の価格改定、中止品および TGK カタログ掲載商品の訂正など、これまで紙媒体ではお伝えしきれなかった情報をお手軽にホームページでご覧いただける事と考えております。これまで以上に、より多くのお客様に情報をお届けし、快適な WEB 環境を整えていくことを目指してまいります。
尚、TGK NEWS をメールでご希望の方は、弊社ホームページ (TryWinZ) よりご登録いただけますようよろしくお願いいたします。

年末年始の
お知らせ

2024年12月27日(金)～2025年1月5日(日)
まで休業させていただきます。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16 電話 03 (3252) 3461
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06 (4800) 3939
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052 (238) 6075
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092 (643) 8645
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階 電話 050 (6868) 2001

新規取扱い商品のご紹介





イオンブローガン
AGZIV



粘度計
TV-150B 形



プロテクトガード
ライトブルーニトリルグローブ

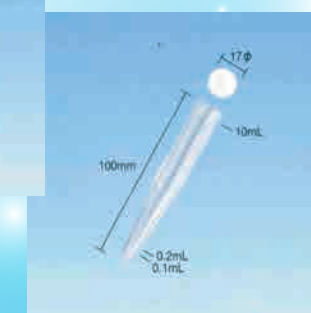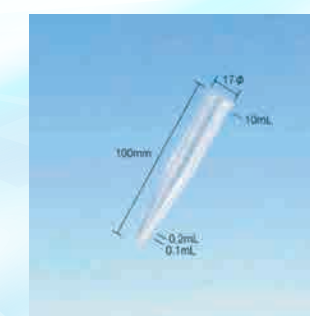

セラピッツシリーズ

イオンブローガン AGZIV

電磁弁を内蔵した高周波 AC コロナ放電式の
エアガンタイプイオナイザです。



- 特長
- ・高周波 AC 放電方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
 - ・高電圧異常発生時は、動作を停止し、LED 表示で通知します。
 - ・エアの ON/OFF は本体に内蔵している電磁弁で行いますので、非常に軽いレバー動作となります。
 - ・イオンエアの吹き出しを間欠（低速 / 高速）に切り替えることが可能です。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除電効果を高めることができ、また、エアの省エネになります。
 - ・高輝度の照明用 LED を搭載しました。塵など異物の確認に役立ちます。
 - ・従来品と互換性があり、多彩なオプションノズルはそのまま装着することができます。

商品コード	型式	品名	価格（¥）
413-25-11-51	AGZIV	イオンブローガン	51,000

イオン生成方式	高周波ACコロナ放電式
電源電圧	DC24V (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
容量	2.4VA
出力電圧	AC2,500V (3pF,100MΩ)
使用流体	清浄な空気
使用圧力範囲	0.05~0.6 MPa
使用エア流量	最大400ℓ/min(ANR)(0.6MPaのとき)
本体寸法	L168.5×W33×H168.5mm(突起部含まず)
本体重量	310g
使用環境温度	0~40℃
使用環境湿度	65%RH以下(結露なきこと)
接続チューブ	外形φ6
イオンバランス	±10V以下
表示	電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯 高圧正常時(レバーON)に青色点灯 高圧異常時に赤色点灯
オゾン発生量	0.04ppm以下(距離200mm)
材質	本体：PBT、ノズル：PPS
付属品	ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、 吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書

粘度計 TV-150B 形



- 特長
- ・円筒ロータを用いた単一円筒形回転粘度計です。
 - ・ピボットレス機構（トーションワイヤーと磁気軸受）の採用により損耗部品がなくなり、初期の優れた再現性が維持されます。
 - ・カラータッチパネル搭載。
 - ・ネジとめ不要のワンタッチ機構により、容易にロータを着脱できます。（バヨネットカップリング）
 - ・オートストップ機能。

商品コード	型式	フルスケールトルク(μN・m)	測定範囲 (mPa・S)	価格（¥）
567-67-60-25	TV-150BM	67.37	15~6,000,000	595,000
567-67-60-26	TV-150BH	718.7	100~40,000,000	595,000
567-67-60-27	TV-150BR	1437.4	100~80,000,000	595,000
567-67-60-28	TV-150BR	5749.6	400~320,000,000	595,000

※付属のロータはピン付きロータです。
※精度、再現性：M1 または H2 ロータ使用時 測定上限値の
10% 以上の測定値

精度	フルスケールの±1.0%以内
再現性	フルスケールの±0.2%以内
表示	粘度値、%トルク値、 測定上限を同時表示 (SIまたはCGS単位)
使用周囲温度	0~40℃
使用周囲湿度	90%RH 以下(結露のないこと)
接液部材質	ステンレス鋼(SUS303/304)
入力電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	20VA
質量	粘度計 約2.1kg スタンド 約2.4kg
外形寸法	粘度計 W120×D182×H199mm スタンド W300×D310×H436mm

プロテクトガード ライトブルーニトリルグローブ



- 特長
- ・しなやかな装着感とフィット感
 - ・優れた耐摩耗性と耐油性
 - ・高い強度と伸縮性
 - ・内面処理によりスムーズな装着
 - ・指先エンボス加工でつかみやすい
 - ・1 枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用
 - ・ラテックスフリー・パウダフリー
 - ・食品衛生法規格試験適合
 - ・RoHS 指令適合

※食品衛生法規格試験適合
※RoHS 指令適合

材質	ニトリルゴム
厚さ	指先：0.14mm 手のひら：0.10mm
指先	エンボス加工
パウダー	フリー
ラテックス	フリー


(A) 小箱 (150 枚入)

商品コード	品番	サイズ	手の平幅(mm)	長さ(mm)	価格（¥）
415-87-09-31	69205	XS	76	L230	3,300
415-87-09-32	69215	S	86	L230	3,300
415-87-09-33	69225	M	98	L230	3,300
415-87-09-34	69235	L	107	L230	3,300

(B) 大箱 (150 枚 ×10 箱)

商品コード	品番	サイズ	手の平幅(mm)	長さ(mm)	価格（¥）
415-87-09-35	69205	XS	76	L230	33,000
415-87-09-36	69215	S	86	L230	33,000
415-87-09-37	69225	M	98	L230	33,000
415-87-09-38	69235	L	107	L230	33,000

セラピッツシリーズ

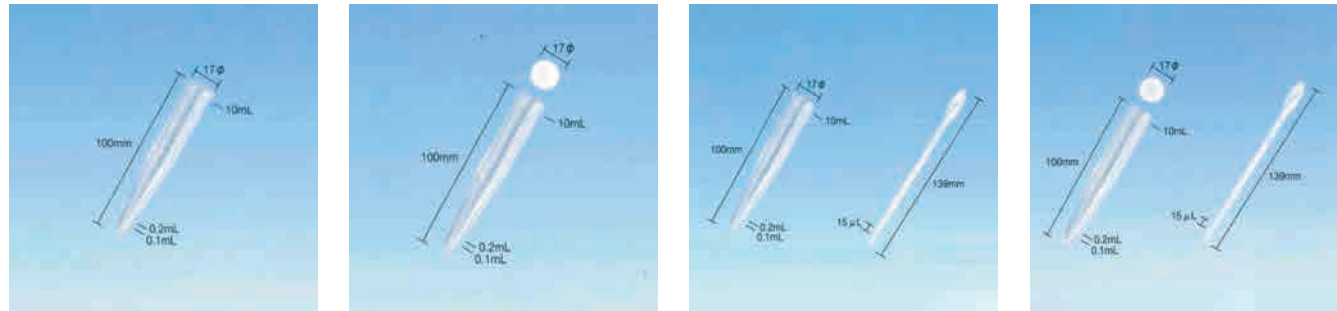

- 特長 ・セラピッツは尿沈渣標準化法に準拠したスピッツです。

商品名	組み合わせ内容
セラピッツ本体のみ	スピッツ (100本×10袋)
セラピッツ本体のみ・エコノミー	スピッツ (2,000本バラ)
セラピッツキャップセット	スピッツ (100本×10袋) + キャップ (100ヶ×10袋)
セラピッツキャップセット・エコノミー	スピッツ (2,000本バラ) + キャップ (100ヶ×20袋)
セラ沈渣A	スピッツ (100本×10袋) + スポイト (50本×20袋)
セラ沈渣A・エコノミー	スピッツ (2,000本バラ) + スポイト (50本×40袋)
セラピッツ3点セット	スピッツ (100本×10袋) + キャップ (100ヶ×10袋) + スポイト (50本×20袋)
セラピッツ3点セット・エコノミー	スピッツ (2,000本バラ) + キャップ (100ヶ×20袋) + スポイト (50本×40袋)

- サイズ・目盛・容量
- ・本体 17φ×100mm
 - ・目盛 0.1mL・0.2mL・10mL
 - ・全容量 10mL
 - ・スポイト目盛間 15μL

商品コード	品番	摘要	包装形態	入数(本)	価格(¥)
294-22-25-32	13003611	セラピッツ本体のみ	100 本 ×10 袋	1000	26,700
294-22-25-36	13003621	セラピッツ本体のみ・エコノミー	2000 本バラ包装	2000	52,300
294-22-25-33	13003612	セラピッツキャップセット	100 本 ×10 袋	1000	38,300
294-22-25-37	13003622	セラピッツキャップセット・エコノミー	2000 本バラ包装	2000	75,000
294-22-25-31	131907	セラ沈渣 A	100 本 ×10 袋	1000	41,700
294-22-25-35	13003620	セラ沈渣A・エコノミー	2000 本バラ包装	2000	80,700
294-22-25-34	13003613	セラピッツ 3 点セット	100 本 ×10 袋	1000	53,300
294-22-25-38	13003623	セラピッツ3点セット・エコノミー	2000 本バラ包装	2000	103,300

目盛	0.1mL,0.2mL,10mL
全容量	10mL