

クールインキュベータ CN-25C

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



温度制御範囲 3~45℃

ペルチェ素子を使うことにより、1℃刻みに温度設定が可能。研究・産業試験用途に適した製品です。

安定した庫内温度環境

アルミ5面自然対流方式により、庫内の温度勾配が小さくなっております。

かんたん操作

2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

低振動設計

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。


コンパクト設計

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。

たっぷり収納

シャーレ(φ90×15mm)が100枚収納できるゆとりがあるサイズです。

操作パネル

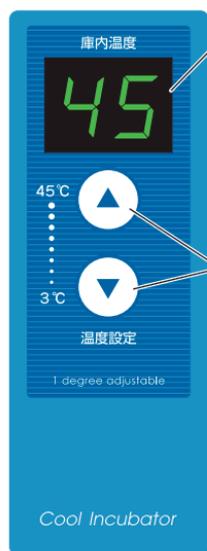

LED表示

庫内温度を表示します。温度設定時には点滅で設定温度を表示します。

温度設定スイッチ

3℃~45℃の範囲で温度設定が可能です

- 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計。お掃除も簡単にできます。
- 棚は3枚に分割できるので、自由なレイアウトで棚を構成することができます。



CN-25C

自然対流方式(5面冷却・加温)

ペルチェ素子モジュール

3~45℃まで1℃単位
(周囲温度0~30℃)

過昇温度保護機能

265×260×360mm

345×445×477mm

アルミ(エポキシ焼付塗装)

ABS樹脂

25L

AC100V 50/60Hz

98W

12kg

棚板一式(3分割タイプ)

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-02	CN-25C	124,000	98,000

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

クールインキュベータ CN-40A

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



温度制御範囲 3℃～45℃

ペルチエ素子を使うことにより、1℃刻みに温度設定が可能。研究・産業試験用途に適した製品です。

安定した庫内温度環境

アルミ5面自然対流方式により、庫内の温度勾配が小さくなっております。

低振動設計

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。

コンパクトで高収納設計

コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。シャーレ(φ90x15mm)を140枚以上収納することができます。


観察用透明内扉

扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)

鍵・接続孔 標準装備

扉には鍵が掛けられ、貴重な試料の保管にもお使いいただけます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せる接続孔が付いています。

操作パネル

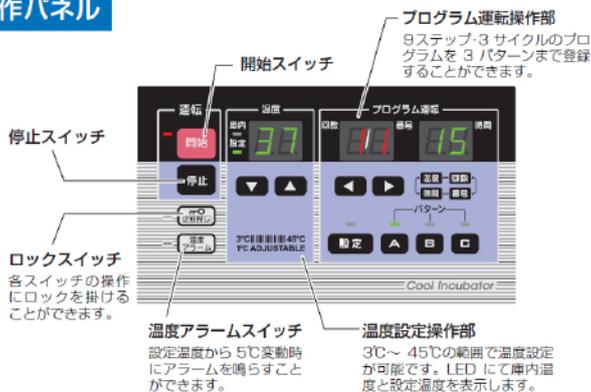

CN-40A	
自然対流方式(5面冷却・加温)	
ペルチエ素子モジュール	
3～45℃まで1℃単位 (周囲温度0～30℃)	
過昇温度保護機能	
360×276×420mm *1	
450×455×550mm	
アルミ(エポキシ焼付塗装)	
鋼板・ABS樹脂	
41L *1	
AC100V 50/60Hz	
98W	
18kg	
棚網2枚、鍵2ヶ 簡易取扱説明シート1枚	

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-01	CN-40A	219,500	175,600

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

小形低温恒温器 SLC-25A

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



庫内温度が安定

ペルチェ素子を使用し、設定温度全域で温度変動がわずかです。
(1℃刻みで3~65℃の) 設定温度が可能です。

配線接続孔標準装備

良好な庫内温度分布

マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により、庫内各部の温度分布が均一に保たれます。

コンパクト設計

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。

製品仕様

形名	SLC-25A
冷却・加温方式	自然対流方式(5面冷却・加温)
冷却・加温装置	ペルチェ素子モジュール
温度制御範囲	3~65℃(1℃単位) (周囲温度 5~30℃)
安全装置	過昇温度保護機能
庫内寸法(WXD×H)	265×260×360mm
外形寸法(WXD×H)	345×445×477mm
庫内材質	アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装材質	ABS樹脂
内容積	25L
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	98W
質量	13kg
付属品	棚板1枚、電気配線接続用キャップ
別売部品	ドア施錠セット 観察用透明内板 ステンレス製棚板

庫内へ配線を通すためのキャップを付属しています。



※庫内収納物は製品には含まれておりません。

かんたん操作

2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

LED表示

庫内温度を表示します。温度設定時には点滅で設定温度を表示します。

温度設定スイッチ

3℃~65℃の範囲で温度設定が可能です。



商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-04	SLC-25A	147,000	117,600

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>