
## eppendorf

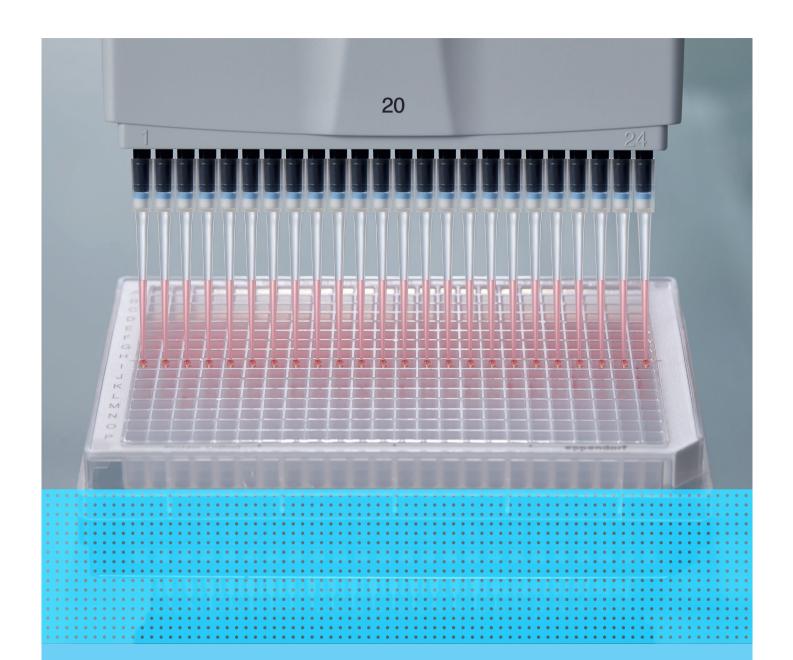

# 384. Ready. Set. Pipette!

384ウェルプレートへのピペッティングをより簡単に NEW: 16/24-channel pipettes and epT.I.P.S.® 384

## 16 and 24 Wells in Just One Step

#### 384ウェルプレートへのピペッティングを容易に

384ウェルプレートへの分注に、より効率的な手動でのピペッティング方法をご紹介します。

エッペンドルフの新しい16-, 24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.® 384が、384ウェルプレートでの作業をより便利で、身体にやさしく、安全にします。

#### 384ウェルを1分で分注

- > 8-, 12-チャンネルピペットでの分注によってかかる 時間やミスを大幅に抑えることができます。
- > 自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。
- > スループットの向上のために、96から384ウェルへの移行 をご検討中の方はぜひお試しください!



## Ergonomics – Practiced Innovation




#### 重要なイノベーション epT.I.P.S. 384のSOFTattachテクノロジー

ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。 チップが伸縮し、装着にかかる力を最小限に抑えつつ、 完璧なフィットを可能にします。

#### メリット:


- > チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
- > チップの着脱にかかる力を削減



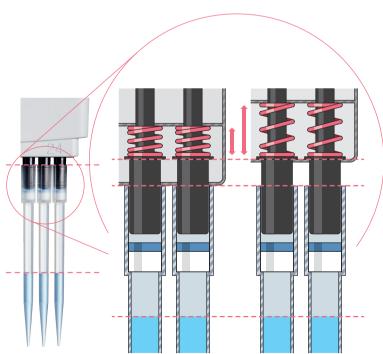

#### 身体に優しく安全な作業のためのスプリング式ノーズコーン

- > チップ装着にかかる力を削減
- > チップのフィッティングが手に伝わる感覚でわかります
- > 液体を均一に吸引

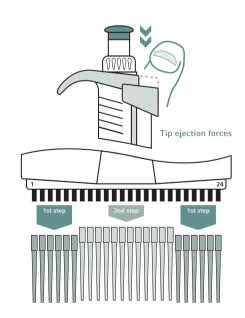

#### チップエジェクトにかかる力を抑えるSOFTeject

まず外側のチップをエジェクトしてから、内側のチップが エジェクトされます。これによりチップエジェクトにかかる 力を50%抑えられます。



#### マイクロピペットの注文案内

チャンネル数	操作ボタンの色	容量範囲	最小可変単位	Order no.	希望小売価格
16 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 μL	0.02 μL	3122000078	¥121,000
	ライトイエロー	5-100 μL	0.1 μL	3122000094	¥121,000
24 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 μL	0.02 μL	3122000086	¥129,000
	ライトイエロー	5-100 μL	0.1 μL	3122000108	¥129,000
16 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 μL	0.02 μL	4861000778	¥219,000
	ライトイエロー	5-100 μL	0.1 μL	4861000792	¥219,000
24 チャンネル	■ ライトピンク	1-20 μL	0.02 μL	4861000779	¥243,000
	ライトイエロー	5-100 μL	0.1 μL	4861000793	¥243,000
	16 チャンネル 24 チャンネル 16 チャンネル	16 チャンネル  24 チャンネル  16 チャンネル  24 チャンネル  16 チャンネル  16 チャンネル  24 チャンネル  24 チャンネル	16 チャンネル	16 チャンネル	16 チャンネル

#### ピペットチップの注文案内

製品名	純度	トレーの色	容量範囲	販売単位	Order no.	希望小売価格
epT.I.P.S. セット 384	Eppendorf Quality	■ ライトピンク	0.1-20 μL	1,920 本 (384 本× 5 トレー)、 チップボックス 1 箱	0030076028	¥38,200
		■ ライトイエロー	0.5-100 μL		0030076036	¥38,200
epT.I.P.S. リロード 384	Eppendorf	■ ライトピンク	0.1-20 μL	3,840本	0030076044	¥64,700
	Quality	ライトイエロー	0.5-100 μL	(384本×10トレー)	0030076052	¥64,700
epT.I.P.S. リロード 384 PCR clean	PCR clean*1	■ ライトピンク	0.1-20 μL	"	0030076001	¥70,900
		ライトイエロー	0.5-100 μL		0030076010	¥70,900
ep Dualfilter T.I.P.S. 384	滅菌済、 PCR clean <sup>*1</sup>	■ ライトピンク	0.1-20 μL	3,840 本 (384 本× 10 箱)	0030078853	¥120,000
		ライトイエロー	0.5-100 μL		0030078861	¥120,000

<sup>\*1</sup> PCR clean: Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free をロット毎に試験しています。


製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2021 年 8 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

### Workflow

#### **Complete Solutions from Eppendorf**

マイクロプレートやサーマルサイクラー、サーモミキサー、 遠心機など、384ウェルのワークフローに必要な製品を ご提供いたします。

詳しくはこちら: www.eppendorf.com

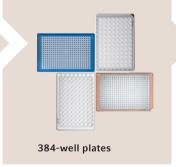







#### www.eppendorf.com